

## TI500 Globe-Trotter® Transporte neonatal

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter combina todas las tecnologías del sistema de transporte Dräger TI500 con características adicionales para un nivel mejorado de cuidados durante el transporte.



## Ventajas

---

### Soporte para ventilación integrado

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter se ha diseñado para transportar a pacientes pediátricos en un entorno térmico neutro, ofreciendo ventilación integrada. El sistema puede configurarse con analizadores de ventilación y oxígeno para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente.

---

### Controles frontales

Además de los controles de la incubadora, todos los controles de ventilación, indicadores del depósito y relacionados con el gas se encuentran en la parte frontal, lo que permite acceder a ellos con rapidez, al mismo tiempo que ofrecen una mayor visibilidad.

---

### Depósito de almacenamiento interno

Los depósitos de gas se encuentran debajo de la incubadora, en el soporte del sistema, que permite transportarlos con facilidad junto con la unidad. Los reguladores, los mecanismos de fijación y los caudalímetros se encuentran integrados, lo que elimina la presencia de tubos en el exterior.

---

### Caudalímetro auxiliar

En el sistema se incluye un caudalímetro auxiliar por defecto, con un circuito manual adicional que permite la resucitación manual si fuera necesario. Esto permite al usuario ventilar a gemelos con una sola incubadora.

---

### Opción de compresor de aire

Entre los principales sistemas de transporte neonatal, el TI200 Globe-Trotter es el único que cuenta con un compresor de aire integrado. Esto permite suministrar aire de uso médico, al mismo tiempo que elimina la necesidad de transportar depósitos.

---

### Otras ventajas clave

- Facilita el suministro de fluidos y el control de las constantes vitales
- Protección contra tirones que evita la extubación accidental
- Posibilidad de recarga de las baterías de apoyo auxiliar
- Selección de diferentes soportes
- Batería secundaria opcional

## Accesorios



D-7384-2009

---

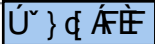
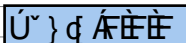
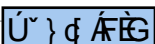
### Accesorios para cuidados neonatales

Los accesorios de Dräger para respiradores y terapia de calor de neonatos procuran una ventilación más suave y de forma efectiva, reducen el estrés y ayudan a promover el desarrollo de los recién nacidos con una amplia gama de accesorios diseñados específicamente para ser utilizados con los pacientes más pequeños.

## Especificaciones técnicas

Altura	58,4 cm
Longitud	129,5 cm
Anchura	56,5 cm
Peso sin compresor	71,6 kg <sup>1)</sup>
Peso con compresor	83,9 kg

### Especificaciones eléctricas

Requisitos de potencia de CA	110/120 V, 50/60/400 Hz 220/240 V, 50/60/400 Hz	
CC (solo incubadora)	12 o 28 V	
Corriente de fuga del chasis	120 V < 300 µA + 10 % 220 V < 500 µA + 10 %	
6 salidas CA		
Cable para incubadora de CA y CC incluido		

### Especificaciones de la batería del compresor

Tipo	Batería de gel sellada recargable, 12 V CC 20 AH
Duración de la batería	Mínimo de 3 horas con mezclador de oxígeno al 21 %
Esperanza de vida	Mínimo de 200 ciclos completos de carga y descarga
Tiempo de carga	20 horas con descarga completa
Alarma de batería baja	Cuando quedan 30 minutos de funcionamiento del compresor de aire

Notas: 1) el peso incluye una batería

GlobeTrotter es una marca comercial de Dräger.

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

#### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania

#### SEDE REGIONAL

**PANAMÁ**  
Draeger Panamá S. de R.L.  
Business Park, Torre V, piso 10  
Av. De la Rotonda  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

#### VENTAS INTERNACIONALES

**ARGENTINA**  
Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321

#### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

#### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

#### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

#### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

#### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

#### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

#### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

