

WOUND CARE DryMax[®]

SOFT


DryMax Soft är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Soft absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårålmiljö bibehålls.

DryMax Soft


Den sömlösa designen förenklar positionering av förbandet på såret. Förbandet har en enkel design med absorption från båda sidor vilket möjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.

Förbandet känns torrt och behagligt för patienteten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårålmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från såret och fördelar den jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core.


Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Soft är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

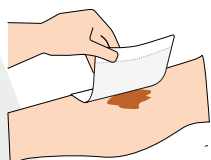

Förbandet placeras i nära kontakt med såret eller i kontakt med ett annat förband.

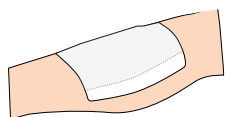

Fixera förbandet på lämpligt sätt med bandagelinda, film eller tejp.

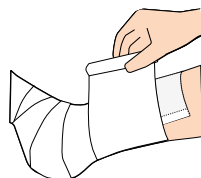

DryMax Soft kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.



- Kostnadseffektiv
- Användarvänlig
- Ökad patientkomfort
- Bättre sårålmiljö



Artikel	Artikelnummer MediCarrier	Avd. fp	Förbandsstorlek i cm	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft 7.5x7.5 cm	97190	10	7.5x7.5	60 ml
DryMax Soft 10x10 cm	97191	10	10x10	130 ml
DryMax Soft 10x15 cm	97192	10	10x15	230 ml
DryMax Soft 15x15 cm	97194	10	15x15	280 ml
DryMax Soft 10x20 cm	97193	10	10x20	330 ml
DryMax Soft 15x20 cm	97195	10	15x20	400 ml
DryMax Soft 20x20 cm	97196	10	20x20	600 ml
DryMax Soft 20x25 cm	97197	10	20x25	780 ml
DryMax Soft 20x30 cm	97198	10	20x30	960 ml
DryMax Soft 37x56 cm	97199	10	37x56	3000 ml



*) Enligt internationell standard EN 13726-1

ABSORBEST

Tillverkad i Sverige av Absorbest AB
www.absorbest.se | info@absorbest.se



PL83-b